

la newsletter du 111

PRINTEMPS-ÉTÉ 2017

LES NEWS DU CABINET

LES ÉVÈNEMENTS 2017

+ POUR UNE PLANIFICATION DE VOS AGENDAS +

L'ÉQUIPE S'AGRANDIT

Toute l'équipe du 111 a le plaisir de vous annoncer l'arrivée d'Emilie, nouvelle secrétaire qui vient renforcer notre équipe actuelle afin d'améliorer la communication et notre qualité de service.

UN SEUL NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
POUR NOUS JOINDRE :

05 46 007 111



Global D

Partenaire de vos chirurgies

L'IMPLANT IN-KONE DE CHEZ GLOBAL D : POURQUOI ?

Notre choix s'est porté sur cette société française spécialisée dans la conception et la fabrication de dispositifs médicaux en raison de la particularité de son système implantaire In-Kone®, de la qualité d'écoute des équipes dirigeantes et de son dynamisme.

En effet, cet implant nous permet de profiter des dernières recherches en implantologie afin d'améliorer l'esthétique, la pérennité, et permet au maximum d'éviter les péri-implantites, les dévissages et les greffes osseuses.

1/ le positionnement chirurgical :

- l'implant est placé en **sous-crestal** (1.5 à 2mm) ce qui permet un clivage osseux au-dessus du col implantaire;
- sa forme est plus **agressive**, permettant un meilleur ancrage osseux immédiat lors de la pose ;
- il existe dans le catalogue des tailles d'implants plus petites (diamètre de 3.0mm et implants **courts et ultra-courts** / 6 et même 4mm de longueur) qui sont aujourd'hui de réelles alternatives aux greffes osseuses ;

2/ la gestion des tissus mous :

- le concept de **switching-platform** qui permet d'augmenter la distance entre le joint prothèse-implant et la muqueuse épithéliale ;
- la possibilité d'adapter la forme et taille de la **vis de cicatrisation** pour obtenir une émergence prothétique plus esthétique ;

3/ la connexion prothétique :

Le **cône morse** permet une meilleure étanchéité de la jonction pilier-implant et **prévient le dévissage**. Doublé du concept de **switching-platform**, ils permettent d'obtenir une absence de perte osseuse crestale lors des premiers mois et par la suite, **évite la péri-implantite** ;

4/ l'accastillage prothétique simplifié:

- un **seul** diamètre de pilier et d'analogue;
- empreinte facilitée par la technique « **pop-up** »;

5/ le savoir-faire **français**, une équipe plus petite et plus réactive, à notre écoute;

6/ le **prix** inférieur aux systèmes historiques mais d'aussi bonne qualité d'usinage.

CONFÉRENCE

Connexion conique, implants courts et maintenance.

Date : jeudi 8 juin 2017 à partir de 13H30

Lieu : Le Carré 1705- Le Pas des Eaux - 17690 Angoulins-sur-Mer

Conférencier : Dr Bernard CHAPOTAT

Connexion conique, implants courts et maintenance. Tels sont les facteurs clés de succès pour certaines réhabilitations. Les implants courts sont une réelle alternative aux greffes osseuses, c'est pourquoi il est intéressant de comprendre l'enjeu de leur connexion et de savoir comment optimiser dans le temps la réussite de ces traitements thérapeutiques.

CYCLE DE PROTHÈSE IMPLANTAIRE

Pour les praticiens

L'In-Kone® de Global D

Une seule connectique - Un seul transfert

Le cabinet 111 vous invite à participer à une formation de prothèse sur implants In-Kone® Universal.

Chaque journée du cycle proposera :

- + Accueil des participants
 - + Présentation du système In-Kone® (trucs et astuces)
 - + Manipulations prothétiques
 - + Fin de la formation
- (Participants limités à 4 praticiens par journée)

SÉANCE AMICALE

Tournoi des «4 raquettes»

Ping pong + badmington + squash + padel tennis.

Remise des prix :

par Charles Kloboukoff, le président France du 1% pour la planète.

Date : jeudi 14 septembre 2017 à partir de 13H30 et jusqu'à 23h

Lieu : Le FIVE Avenue Paul Langevin - 17180 Périgny

Programme :

- + 13h30 - Accueil des participants
- + Après-midi - Tournoi sportif amical
- + 19h - Dîner sur place

CONFÉRENCE ET SOIRÉE DE FIN D'ANNÉE

Réhabilitation complète d'un maxillaire et mise en charge immédiate.

Date : Mercredi 13 décembre 2017 de 19H à 23H

Lieu : Restaurant Chez André - 5, rue Saint Jean du Pérot - 17000 La Rochelle

Thème : Les concepts et modalités de traitement ont subi de notables évolutions, la dernière en date pouvant être considérée comme une révolution. Il s'agit de la redécouverte des protocoles de mise en charge immédiate (MCI). L'engouement pour cette nouvelle technique ne se dément pas, l'intérêt clinique suscité est en augmentation constante.

FORMATIONS

Pour les assistantes

- Présentation du système prothétique Global D®
 - Travaux pratiques sur modèles
 - Démonstration du travail prothétique et chirurgical sur patient.
- (Nombre limité à 6 assistantes par session)

Deux sessions vous sont proposées au cabinet 111 :

- > **MARDI 30 MAI 2017 DE 13H30 À 17H**
- > **JEUDI 5 OCTOBRE 2017 DE 13H30 À 17H**

LE CAS DU MOIS PAR LE DR FRANÇOIS POIROUX

« Mise en charge immédiate d'un implant en 21 avec R.O.G »

Le choix de la prothèse transviscée a été défini avant la chirurgie implantaire suite à l'examen du scanner. Avec cette technique nous avons pu poser une dent provisoire sur l'implant en évitant une greffe osseuse d'apposition. Ce qui a diminué les temps opératoires et le coût global de la réalisation ; la R.O.G. étant moins onéreuse que la greffe osseuse d'apposition.



LA PATIENTE : FEMME DE 59 ANS

Madame F, me consulte pour refaire sa couronne sur 21 (Photo 1)
Madame F. a déjà eu un implant en 11 avec greffe osseuse d'apposition en 2007, pose d'un implant Spline de 3,75 mm de diamètre.



LE TRAITEMENT IMPLANTAIRE

En ce qui concerne la 21, nous avons décidé le plan de traitement suivant :

- Extraction de la 21 et pose d'une prothèse amovible provisoire le jour de l'extraction.
- Pose de l'implant 8 semaines plus tard avec mise en esthétique immédiate. Empreinte faite le jour de la chirurgie et pose d'une dent provisoire transviscée 48 heures plus tard. (Photos 2 et 3). Lors de la chirurgie, j'ai réalisé une régénération osseuse guidée avec poudre d'os humain (BIOBANK), et protocoles A-PRF et I-PRF (prélèvement sanguin et centrifugation pour avoir des membranes PRF)
- Après 4 mois de cicatrisation, vous pouvez observer la qualité gingivale autour du col implantaire. (Photo 4)
- Dépose de la dent provisoire et empreinte avec un transfert d'empreinte et injection de résine pour enregistrer le col gingival implantaire. (Photos 4 et 5)
- Pose de la couronne céramique transviscée conçue en CFAO. (Photo 6)

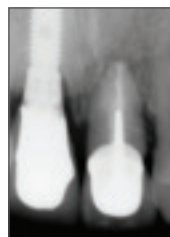


Photo 1



Photo 2

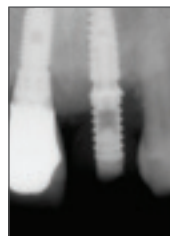


Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6