

# Produktinformation

## REF 103-A



**REF 103-A**



### TRACOE *comfort* Tracheostomiekanüle mit Sprechfunktion

- Inklusive:
- ◆ Innenkanüle, gefensterert, mit aufschiebbarem Sprechventil Typ A (Klappenträger aus Silber)
  - ◆ Innenkanüle mit 15 mm-Konnektor
  - ◆ Innenkanüle mit Sockel
  - ◆ Kanülenband


Für tracheotomierte Patienten mit erhaltenem oder teilweise erhaltenem Kehlkopf zum Sprechen.

**Hilfsmittel-Nr.: 12.24.03.1059**

### Technische Daten

REF 101, REF 102, REF 102-D, REF 103, REF 103-O, REF 103-A, REF 103-A-O, REF 104, REF 104-O, REF 104-A, REF 104-A-O, REF 105, REF 105-D, REF 107, REF 108

REF 114 und REF 115 *in den Größen 07 – 11*

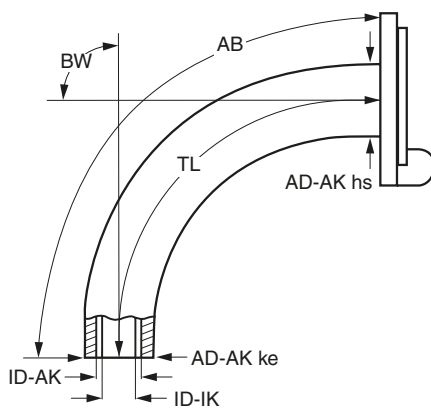

Größe	ID-AK	AD-AK ke	AD-AK hs	ID-IK	TL	AB	BW
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°
03	3,5	4,8	6,4	2,6	42	46	90°
04	4,0	5,6	7,3	3,2	50	55	90°
05	5,0	6,7	8,7	4,0	52	57	90°
06	6,0	7,6	10,0	4,8	54	60	90°
07	7,0	8,8	10,5	5,8	57	65	90°
08	8,0	10,0	11,3	6,8	61	70	90°
09	9,0	11,4	12,6	7,6	65	75	90°
10	10,0	12,4	13,7	8,7	74	85	90°
11	11,0	13,1	15,0	9,7	76	87	90°
12	12,0	14,2	16,2	10,8	78	90	90°
13	13,0	15,4	17,2	11,8	87	100	90°
14	14,0	16,6	18,2	12,6	91	105	90°


Kanülen der Größen 03, 04, 13 und 14 werden auf Bestellung produziert. Die Lieferzeit beträgt ca. 10 Arbeitstage.

**ID-AK:** Innendurchmesser (Lumen) der Außenkanüle am unteren Ende; **AD-AK ke:** Außendurchmesser der Außenkanüle am unteren Ende; **AD-AK hs:** Außendurchmesser der Außenkanüle hinter dem Schild; **ID-IK:** Innendurchmesser der Innenkanüle am unteren Ende; **TL:** Länge über den Mittelbogen vom Kanülenschild bis zum unteren Kanülenende; **AB:** Länge über den Außenbogen (größte Länge); **BW:** Biegewinkel

Die Bestellnummer besteht aus der **REF + Größe**, z. B. **REF 103-08**

# Produktinformation

## REF 103-A

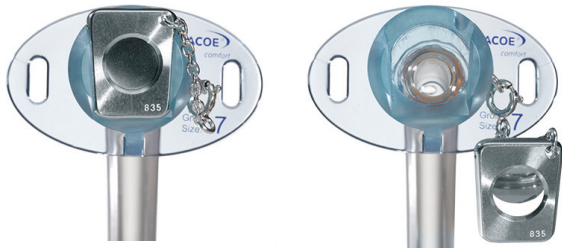

### ◆ TRACOE *comfort* Sprechventil Typ A

TRACOE *comfort* Kanülen mit dem Sprechventil Typ A haben einen Klappenträger aus Silber, der mit einer Kette an der Innenkanüle befestigt ist. Er lässt sich bei Bedarf durch Herausschieben von der Innenkanüle lösen. Dies ermöglicht den freien Zugang zum Innenlumen der Kanüle, z. B. für die Absaugung von trachealem Sekret.

### Lieferumfang der TRACOE *comfort* Kanülen



Alle TRACOE *comfort* Kanülen werden mit einem breiten, längenverstellbaren Kanülenband sowie einem Produktpass mit zwei abziehbaren Produktetiketten geliefert.

### FEUCHTIGKEITS- UND WÄRMEAUSTAUSCHER

- ◆ TRACOE humid assist I REF 640-CT  
mit Schaumstofffilter zum Aufstecken auf alle Tracheostomiekanülen mit 15 mm-Konnektor
- ◆ TRACOE humid assist III REF 641  
mit Papierfilter, optionalem um 360° drehbarem Sauerstoffanschluss, zum Aufstecken auf alle Tracheostomiekanülen mit 15 mm-Konnektor
- ◆ TRACOE humid assist VI REF 642  
mit Schaumstofffilter, integriertem Sauerstoffanschluss und Überdruckventil zum Abhusten größerer Sekretmengen, zum Aufstecken auf alle Tracheostomiekanülen mit 15 mm-Konnektor

### HILFSMITTEL UND REINIGUNGSARTIKEL

- ◆ TRACOE *care* Paraffinöl REF 902  
Hält die Innenkanüle gleitfähig, sorgt für eine optimale Passung und gute Sprechqualität.
- ◆ TRACOE tube clean Reinigungsset REF 930-A/-B  
mit Reinigungspulver REF 932
- ◆ TRACOE tube clean Reinigungsset REF 931-A/-B  
mit Reinigungskonzentrat REF 933

### PRODUKTVARIANTEN

Produktvarianten können bei Bedarf nach Maß gefertigt werden, um auch bei komplizierten anatomischen und physiologischen Gegebenheiten beste Funktionalität und optimalen Tragekomfort zu bieten. Das entsprechende Bestellformular finden Sie auf unserer Webseite unter [www.tracoe.com/downloads](http://www.tracoe.com/downloads).