


# Produktinformation

## REF 362



REF 362

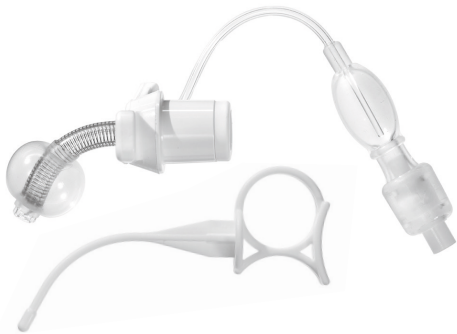

**TRACOE silcosoft® Tracheostomiekanüle**  
für Neugeborene und Kleinkinder, mit H<sub>2</sub>O Cuff,  
aus Silikon

- Inklusive:
- ◆ Ring-Obturator
  - ◆ Kanülenband
  - ◆ Trennhilfe
  - ◆ steril verpackt

### Der „Silikonvorteil“


Die Materialeigenschaften von Silikon sind besonders für kleine Patienten vorteilhaft: biologisch verträglich, Latex- und DEHP-frei sowie leicht einführbar. Es zeigt sich weniger anfällig für Verkrustungen und ist leicht zu reinigen. Die silcosoft Kanülen sind bis zu 7 mal wiederaufbereitbar.

### Der H<sub>2</sub>O Cuff

Im entblockten Zustand liegt der Cuff bündig am Kanülenrohr an, trägt also nicht auf. Er wird mit sterilem Wasser gefüllt (Befüllung bis zu 2ml). Der Cuff dient der Abdichtung, um eine Aspiration von Nahrung und Speichel aus dem Rachenraum oder ein unerwünschtes Entweichen der Luft während einer Beatmung zu verhindern.

### Technische Daten

REF 360, REF 361, REF 362, REF 363

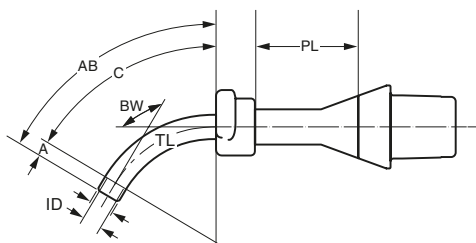

Größe	ID	AD	A	C	TL	AB	BW	PL
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	°	mm
2.5	2,5	4,4	3,2	26,8	30	32	120	15
3.0	3,0	4,9	4,0	28,0	32	34	120	17
3.5	3,5	5,4	5,0	29,0	34	37	120	20
4.0	4,0	6,0	7,0	29,0	36	39	120	22

**ID:** Innendurchmesser (Lumen) der Innenkanüle am unteren Ende; **AD:** Außendurchmesser der Außenkanüle; **A:** Länge; **C:** Länge; **B:** Länge; **TL:** Länge in der Mittellinie vom Schildansatz bis zum unteren Kanülenende; **AB:** Länge am Außenbogen vom Schildansatz bis zum unteren Kanülenende **BW:** Biegewinkel; **PL:** proximal-länger

Die Bestellnummer besteht aus der **REF + Größe**, z. B. **REF 370-2.5**

# Produktinformation

## REF 362

### Lieferumfang der TRACOE *kids* Kanülen



Alle TRACOE silcosoft Kanülen werden mit einer Trennhilfe geliefert.



Alle TRACOE *kids* Kanülen werden mit einem Obturator, einem breiten, weichen und längenverstellbaren Kanülenband (REF 903-G) sowie einem Produktpass mit zwei abziehbaren Produktetiketten geliefert.

### SPEZIELLES ZUBEHÖR FÜR TRACOE *kids*

- ◆ TRACOE humid assist mini REF 643
- ◆ TRACOE Kanülenband und Kompressen finden Sie im Zubehör-Programm TRACOE *care*