



PRODUKTE

Parker Flex-Tip™ der Nasal-Tubus mit atraumatischer Spitze

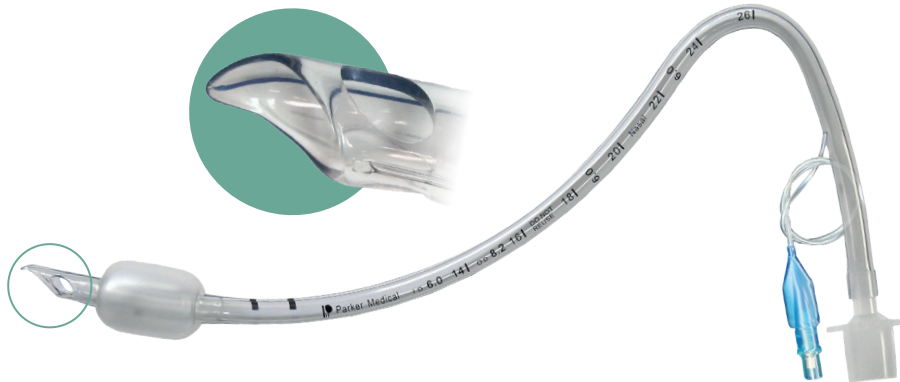


Abb.1 – Parker Flex-Tip™

Der vorgeformte Tubus, kombiniert mit der speziellen Parker Flex-Tip, erleichtert die Passage bei der nasalen Intubation. Weichteilkontusionen und daraus resultierende Blutungen werden vermindert.

Dank der elastischen, leicht gebogenen atraumatischen Flex-Tip, gleitet der flexible Nasal-Tubus schonend über und entlang der Gewebestrukturen.

(Abb. 1)

Konventionelle Tubusspitzen können die Intubation erschweren, indem sie sich nicht vorschieben lassen.

(Abb. 2)


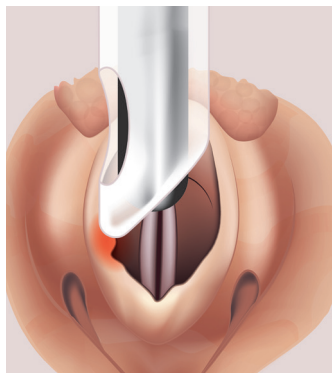


Abb. 2 – Standard Tubusspitze

Merkmale

- atraumatische Tubus-Spitze
- weich, elastisch
- knickstabil und trotzdem flexibel
- zwei Murphy Augen für zusätzliche Sicherheit
- Tiefenmarkierung oberhalb des Cuffs erleichtert die Positionierung
- Röntgenkontraststreifen zur sicheren Lagekontrolle

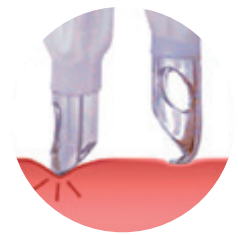

Bestellinformationen

Bestellnummer	Beschreibung	Größe	Verpackungseinheit
REF I-PFNC-40	Parker Flex-Tip Nasal-Endotrachealtubus, mit Cuff	4,0 mm	5 Stk., einzeln steril verpackt
REF I-PFNC-45	Parker Flex-Tip Nasal-Endotrachealtubus, mit Cuff	4,5 mm	5 Stk., einzeln steril verpackt
REF I-PFNC-50	Parker Flex-Tip Nasal-Endotrachealtubus, mit Cuff	5,0 mm	5 Stk., einzeln steril verpackt
REF I-PFNC-55	Parker Flex-Tip Nasal-Endotrachealtubus, mit Cuff	5,5 mm	5 Stk., einzeln steril verpackt
REF I-PFNC-60	Parker Flex-Tip Nasal-Endotrachealtubus, mit Cuff	6,0 mm	5 Stk., einzeln steril verpackt
REF I-PFNC-65	Parker Flex-Tip Nasal-Endotrachealtubus, mit Cuff	6,5 mm	5 Stk., einzeln steril verpackt
REF I-PFNC-70	Parker Flex-Tip Nasal-Endotrachealtubus, mit Cuff	7,0 mm	5 Stk., einzeln steril verpackt
REF I-PFNC-75	Parker Flex-Tip Nasal-Endotrachealtubus, mit Cuff	7,5 mm	5 Stk., einzeln steril verpackt
REF I-PFNC-80	Parker Flex-Tip Nasal-Endotrachealtubus, mit Cuff	8,0 mm	5 Stk., einzeln steril verpackt
REF I-PFNC-85	Parker Flex-Tip Nasal-Endotrachealtubus, mit Cuff	8,5 mm	5 Stk., einzeln steril verpackt
REF I-PFNC-90	Parker Flex-Tip Nasal-Endotrachealtubus, mit Cuff	9,0 mm	5 Stk., einzeln steril verpackt

