

MercuryMedical® PRODUKTE**Flow-Safe® II und Flow-Safe II EZ® CPAP-System**

Flow-Safe II mit Deluxe-Maske

Komplett verpackte Sets zum schnellen und einfachen Einsatz zur CPAP-Therapie – auch mit integriertem Vernebler (Flow-Safe II EZ). Das System ist mit geringem apparativen Aufwand anwendbar und mit dem Anschluss an eine Gasquelle einsatzbereit. Einstellung des PEEP erfolgt über die Gasdurchflussrate.

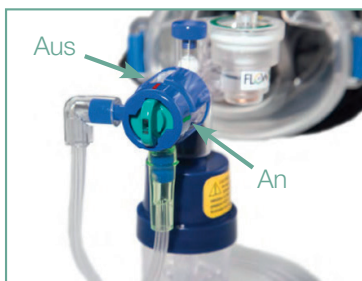
- kompaktes Einpatienten-Produkt als Set
- plug and play Prinzip - kein Zusammenbau nötig
- sicheres, offenes System - wenn nötig, kann der Patient Umgebungsluft atmen
- integriertes Manometer - PEEP-Level ablesbar
- Sicherheitsventil 25 cmH₂O

Rascher Einsatz im präklinischen Bereich zum Therapiebeginn direkt vor Ort nach der Diagnose z. B. bei kardialem Lungenödem oder COPD-Exazerbation. Weiterverwendung des Flow-Safe-Systems in der Klinik möglich.

Klinischer Einsatz z.B. in der Notaufnahme, während der postoperativen Überwachung bei Geräteengpässen, zur Atelektasenprophylaxe oder -therapie. Beim Patiententransport bleibt das System am Patienten.

Inline Vernebler

- AN / AUS Funktion
- ohne Therapieunterbrechung befüllbar
- keine zusätzliche Gasquelle zum vernebeln nötig

Ein-/ Aus-Schalter des Verneblers
in neuem, integriertem DesignFlow-Safe II EZ
mit Vernebler

Deluxe-Maske mit Anschlüssen (Ports)

- 4-Punkt-Bänderung, mit Klettverschlüssen einstellbar
- die Anlage kann durch eine Person erfolgen
- Maske kann zur Medikamentgabe angehoben werden
- Maskenkörper aus hochwertigem, festen und transparentem Material in 3 Größen
- Stirnstütze mit Polster zur Entlastung des sensiblen Nasenbereiches
- sehr gute Abdichtung durch Doppel-Seal-Design



Bestellinformationen

Bestellnummer	Beschreibung	Verpackungseinheit
REF 10-57231	Flow-Safe II L mit Dreh- und Winkelstück und Deluxe-Maske mit Anschlüssen	5 Stück, einzeln im Set verpackt
REF 10-57232	Flow-Safe II M mit Dreh- und Winkelstück und Deluxe-Maske mit Anschlüssen	5 Stück, einzeln im Set verpackt
REF 10-57233	Flow-Safe II S mit Dreh- und Winkelstück und Deluxe-Maske mit Anschlüssen	5 Stück, einzeln im Set verpackt
REF 10-57234	Flow-Safe II L mit geradem Drehstück und Deluxe-Maske mit Anschlüssen	5 Stück, einzeln im Set verpackt
REF 10-57235	Flow-Safe II M mit geradem Drehstück und Deluxe-Maske mit Anschlüssen	5 Stück, einzeln im Set verpackt
REF 10-57318	Flow-Safe II EZ L, mit Vernebler und Deluxe-Maske mit Anschlüssen	5 Stück, einzeln im Set verpackt
REF 10-57319	Flow-Safe II EZ M, mit Vernebler und Deluxe-Maske mit Anschlüssen	5 Stück, einzeln im Set verpackt

