


PolyMem® Finger/tå

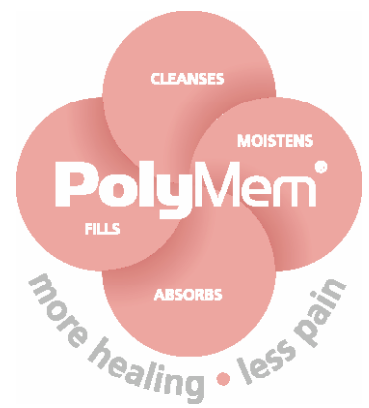

Designet for enkelt og komfortabelt bandasjeskift på fingre og tær

Det ideelle valget ved:

Ulike finger/tå skader, kuttskader, avkappede fingertupper, diabetessår, brannskader, eksem og allergier, avlastning, infiserte sår, etc.

PolyMem – en Multifunksjonell polymeric bandasje

PolyMem er en unik multifunksjonell bandasje spesifikt utviklet for å optimalisere sårbehandlingen ved aktivt å stimulere tilhelingsprosessen. Alle PolyMem bandasjer inneholder Glyserin, Surfactant og Superabsorbent som gjør at bandasjen effektivt renser, fyller, absorberer og holder såret fuktig gjennom hele tilhelingsfasen.

PolyMem er designet for å aktivere og stimulere sårtilheling, og å redusere smerteopplevelsen.



PolyMem's unike egenskaper

RENSER

- Stimulerer aktivt sårtilhelingen
- Skånsom debridering
- Såret renses kontinuerlig og behovet for å rengjøre såret reduseres

ABSORBERER

- Kraftfull superabsorbent trekker det døde vevet fra såret og opp i bandasjen
- Superabsorbenten i bandasjen trekker sårveske til såret, sårveske inneholder vekstfaktorer og næringsstoffer som er viktige i sårtilhelingsprosessen.

REDUSERER SMERTE OG INFLAMMASJON

- Mindre smerte i såret
- Reduserer inflammasjon i og rundt såret
- Minsker risiko for infeksjon

ENKEL Å BRUKE

- Enkel prosedyre
- Enkelt og raskt sårskift
- Dekker alle reglene for fuktighetsbevarende sårbehandling

PolyMem inneholder:

GLYSERIN en fuktighetsbevarer

Holder sårsengen fuktig og løser opp traumatisk vev. Hindrer at bandasjen fester seg i såret og reduserer smerte ved sårskifte. Trekker næringsstoffer og vekstfaktorer til såret og stimulerer tilhelingsprosessen

SURFACTANT F-68, en mild ikke-toxisk renser

Reduserer spenning mellom friskt og dødt vev. Løsner fibrinbelegg og nekrotisk vev. Reduserer behovet for vask/rensing av såret.

SUPERABSORBENT tar opp og binder spesifikt vannmolekylene fra eksudatet i bandasjen.

Gir økt konsentrasjon av naturlige vekstfaktorer og næringsstoffer i sårsengen.

BESTILLINGSINFORMASJON


Kode	Produkt	Strl	Antall
Finger/Tå Bandasje			
4401	Finger/tå bandasje	Str. S, 46,7 - 57 mm	6 pr pakke 5 pakker pr eske
4402	Finger/tå bandasje	Str. M, 57 - 67,2 mm	6 pr pakke 5 pakker pr eske
4403	Finger/tå bandasje	Str. L 67,2 - 77,6 mm	6 pr pakke 5 pakker pr eske
4404	Finger/tå bandasje	Str. XL 77,4 - 87,6 mm	6 pr pakke 5 pakker pr eske
4405	Finger/tå bandasje	Str. XXL 87,6 - 97 mm	6 pr pakke 5 pakker pr eske
1401	Sølv Finger/tå bandasje	Str. S, 46,7 - 57 mm	6 pr pakke 5 pakker pr eske
1402	Sølv Finger/tå bandasje	Str. M, 57 - 67,2 mm	6 pr pakke 5 pakker pr eske
1403	Sølv Finger/tå bandasje	Str. L 67,2 - 77,6 mm	6 pr pakke 5 pakker pr eske
1404	Sølv Finger/tå bandasje	Str. XL 77,4 - 87,6 mm	6 pr pakke 5 pakker pr eske
1405	Sølv Finger/tå bandasje	Str. XXL 87,6 - 97 mm	6 pr pakke 5 pakker pr eske




1 Mål for å avgjøre lengden på bandasjen. Klipp av overskytende.



2 Fjern innstikket fra bandasjen.

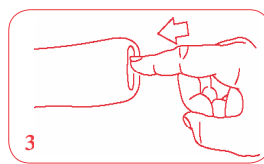


3 Stikk fingeren / tåen inn i bandasjen.

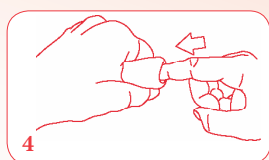

4 Skyv fingeren / tåen inn og begynn pårullingen.



5 Rull bandasjen over finger / tå.

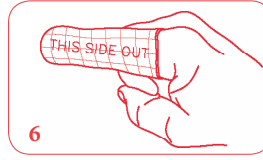

6 Bandasjen må tilpasses med riktig størrelse. Small, Medium, Large. XLarge och XXLarge

Vil du vite mer om PolyMem vennligst besøk vår hjemmeside: www.partnermed.no eller kontakt:
Hovedkontoret: Kamilla Kristansen tlf: +47 940 00 474, kamilla@partnermed.no